

テラニシマッサージャー ファイター VM-6000

ごきげん ボクサー


取扱説明書

テラニシマッサージャー「ファイター VM-6000 ごきげんボクサー」をお買い上げいただき、ありがとうございました。

- この取扱説明書を十分に読んでいただき、正しい使い方でご愛用ください。
- 別途添付の保証書もご一読ください。
お読みになられた後も、取扱説明書と保証書は大切に保管してください。

目次

特に注意していただきたいこと	1
●ご使用前の注意	2
●ご使用中の注意	3
●ご使用後および保管の注意	4
特長と各部の名称	5
ご使用方法	6
日常のお手入れについて	9
故障かな?と思われたとき	
アフターサービスについて	10

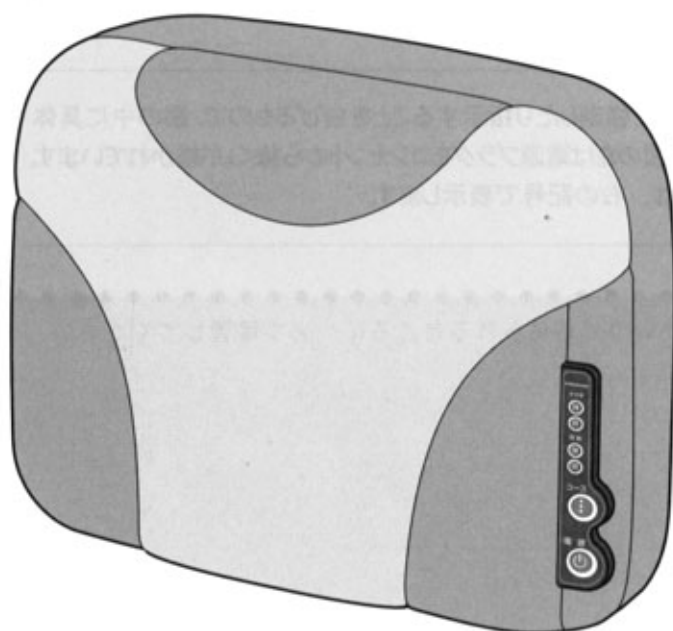

特に注意していただきたいこと

機器による事故や、故障を防ぐために、ご使用前に必ずお読みください。

この取扱説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示例



分解禁止



一般的な禁止

⊘の記号は禁止行為であることを告げるもので、図の中に具体的な禁止内容(図の左は分解禁止)が描かれています。
一般的な禁止は、右の記号で表示します。



電源プラグを
コンセントから抜く



一般的な強制事項

●の記号は行為を強制したり指示することを告げるもので、図の中に具体的な強制内容(図の左は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。
一般的な強制は、右の記号で表示します。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

ご使用前の注意


⚠ 警告

<div data-bbox="93 852 166 929" data-label="Image"></div> <p>医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。次の人は、必ず医師とご相談の上で使用ください。</p> <p>事故や体調不良を起こす原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師の治療を受けている人や特に身体に異常を感じているとき ・ ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器を使用している人 ・ 心臓に障害のある人 ・ 悪性腫瘍のある人 ・ 腱鞘炎の人 ・ 妊娠中や生理中の人 ・ 背骨に異常のある人や曲がっている人 ・ かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ・ 骨の弱い人(骨粗しょう症等) ・ 重度の高血圧の人 ・ 安静を必要とする人 ・ 高熱の人(38℃以上) ・ 皮膚に障害のある人 ・ 知覚障害の人 ・ 急性(疼痛性)疾患のある人 ・ 使用しても効果があらわれないとき <p>本体の表地に破れがないか確認してください。破れを見つけたら使用せずに修理を依頼してください。けがや故障の原因になります。</p>	<p>マッサージ以外の目的では使用しないでください。</p> <p>けがや故障の原因になります。</p> <p>お子様に使わせたり、手の届くところに置かないでください。けがや事故の原因になります。</p> <div data-bbox="1167 523 1311 678" data-label="Image"></div>
	<p>タコ足配線はやめてください。感電や火災の原因になります。電源は50Hzまたは、60Hzの家庭用AC100Vコンセントから直接単独で使用ください。</p> <div data-bbox="1146 745 1359 880" data-label="Image"></div>
	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、絶対に使用しないでください。感電や火災の原因になります。</p>
<div data-bbox="721 852 797 929" data-label="Image"></div> <p>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。感電や火災の原因になります。</p> <div data-bbox="1167 1103 1339 1267" data-label="Image"></div>	<p>風呂場などの湿気の多い場所で使用しないでください。感電や故障の原因になります。</p> <div data-bbox="1167 1296 1359 1489" data-label="Image"></div>
<div data-bbox="93 1392 166 1470" data-label="Image"></div> <p>頭部・頸部・関節(骨の上)・腹部へは、使用しないでください。身体を痛める原因になります。</p> <div data-bbox="529 1383 687 1489" data-label="Image"></div>	<div data-bbox="721 1392 797 1470" data-label="Image"></div>









⚠ 注意

<div data-bbox="93 1692 166 1769" data-label="Image"></div>	<p>裸で使用しないでください。肌着やタオル等の上からご使用になり、同じ部分に長時間当てすぎないでください。特にお年寄りや皮膚の弱い方はご注意ください。</p> <p>低温やけどの恐れがあります。(低温やけどとは、低い温度でも1ヶ所に長時間あてていると紅斑・水泡等の症状をおこすことです。突起部を長時間1ヶ所に当てつづけると摩擦熱で同じような症状をおこすことがあります。ご注意ください。)</p>
---	--

特に注意していただきたいこと

⚠ 注意	
<p>食前、食後の30分は使用しないでください。 体調不良を起こす原因になります。</p>	<p>大切な衣類の上からマッサージするときは、 タオル等の布を挟んでご使用ください。 皮膚や衣類を痛めたり、汚したりすることがあります。</p>
<p>⚠</p> <p>マッサージャーを使用する前(特にしばらく使用していなかった場合)に、マッサージャーが正確に作動するかどうか、また電源コードの接続が正確かどうかをご確認ください。 感電や火災の原因になります。</p> 	<p>⚠</p> <p>眠気を誘う薬(睡眠薬・かぜ薬等)を飲まれた方および飲酒等により感覚が鈍っている時は使用しないでください。 体調不良を起こす原因になります。</p>

ご使用中の注意



⚠ 注意	
<p>⚠</p> <p>身体にはげしい痛みや、異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。 症状が悪化するおそれがあります。</p> 	<p>⚠</p> <p>タタキや振動が強すぎる場合は、厚手のタオルなどを当ててからご使用ください。 身体を痛める原因になります。</p> 
<p>⚠</p> <p>ご使用時間は1ヶ所5分以内、1回につき15分以内にどめ低温やけどに注意しながらご使用ください。次回ご使用までに15分以上の休止時間をおいてください。初めは1回の使用時間を3~5分で、慣れるにしたがって長くします。 15分をこえての使用は、筋肉、神経に対して必要以上の刺激となり逆効果です。</p> 	<p>⚠</p> <p>振動部を触って、位置を確認してからゆっくりと寝転んでください。 けがや事故の原因になります。</p>
<p>⚠</p> <p>マッサージャーに異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、コントローラーの電源を切ってください。 身体を痛める原因になります。</p> 	<p>⚠</p> <p>他の健康機器と併用しないでください。 身体を痛める恐れがあります。</p>
<p>⚠</p> <p>コントローラー付近やファスナーの隙間から、指やものを入れないでください。 けがや故障の原因になります。</p> 	<p>⚠</p> <p>振動部を強く押さえ付けたり、固い所へは当てないでください。 けがや故障の原因になります。</p> 
	<p>⚠</p> <p>マッサージャーの上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。 けがや故障の原因になります。</p> 
	<p>⚠</p> <p>火気に近づけないでください。 マッサージャーの変形によるショートや発火の原因になります。</p> 

⚠ 注意

<p>ベルトやアクセサリなど、固い物が振動部に当たらないようにしてください。 振動部が溶けたり破損や故障の原因になります。</p> 	<p>マッサージャーを落としたり、強い衝撃をあたえないでください。 破損や故障の原因になります。</p> 
<p>布団の中など、通気のわるい状態での使用は絶対にさけてください。 過熱して火災などの原因になります。</p> 	<p>本体の表地が破損した状態で使用しないでください。 けがや故障の原因になります。</p>  <p>停電のときは、必ずコントローラーの電源を「切」の状態にし、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。</p> 

ご使用後および保管の注意

⚠ 警告

<p>マッサージャーの改造は、しないでください。また故障の場合も、ご自分では修理しないでください。ファスナーは、開けないでください。 発火や感電、けがなどの原因になります。 必ず、お買上店または、弊社サービス係までご連絡ください。</p> 	<p>NO!</p> 
--	--

⚠ 注意

<p>ご使用时以外は、必ずコントローラーの電源を「切」の状態にし、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。</p> 	<p>電源プラグにピンやゴミ、水分を付着させないでください。 感電や発火の原因になります。</p> 
<p>電源コードをマッサージャーに巻き付けしないでください。 電源コードはねじれをほどいて保管してください。</p> 	<p>風呂場などの湿気の多い場所で保管しないでください。 感電や故障の原因になります。</p> 
<p>長時間ご使用にならない場合は、ほこりや汚れが付かないように、箱に入れて保管してください。</p> 	<p>本体を洗濯しないでください。本品は防水製品ではないので水洗いしないでください。 感電や故障の原因になります。</p>  <p>本体に水などをこぼさないでください。 感電や故障の原因になります。</p> 

特長と各部の名称

クッションタイプのくつろぎマッサージャー

クッションタイプのマッサージャーです。普段はソファに置いてクッションとして使えます。クッションタイプですから、ソファや座椅子はもちろん床やベッドでもリラックスした姿勢でくつろぎながらマッサージできます。縦・横に加えて、斜めでもその場に合わせた置き方で自由自在にマッサージが楽しめます。



タタキながらさする新感覚マッサージャー

拳(こぶし)の力で叩くような気持ちのいい刺激と、掌(てのひら)の力で優しくさするような振動の絶妙な組み合わせが、今までにない新鮮なマッサージ感覚をつくり出しました。広い面積を優しくマッサージしながらポイントを心地よい刺激で叩いてくれます。その時の気分や体調に合わせて楽しめる、目的に応じた個性豊かな3つのコースを作りました。さらに、3つのコースのタタキ、振動の強弱の調整ができます。



簡単に使えるシンプルコントローラー

通常は2つのボタン操作だけ、使いやすさにこだわりました。触ってわかるエンボスボタンを使用しており、さらに操作音により操作が確認できますので、後ろ向きでも操作ができます。



■効能

- 筋肉の疲れをとります。
- 神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげます。
- 筋肉のコリをほぐします。
- 血行を良くし、疲労を回復します

■仕様

種 別	機械器具 (77) バイブレーター	重 量	3800g
一 般 名 称	家庭用電気マッサージ器	電 源	100V 50-60Hz
	(JMDNコード34662000)	消 費 電 力	25W
医 療 機 器 分 類	管理医療機器	定 格 時 間	16分 (最大15分タイマー内蔵)
販 売 名 称	ファイターVM-6000	タ タ キ 数	80~900回/分
医療機器認証番号	219AGBZX00017000	振 動 数	1800~3000rpm
本 体 寸 法	高さ400×幅500×奥行140 (mm)	電 源 コ ー ド	約2.8m

ご使用方法

- ⚠ 警告** ① 頭部・頸部・関節（骨の上）・腹部へは、使用しないでください。
身体を痛める原因になります。

- ⚠ 注意** ① 振動部を強く押さえ付けたり、固いところへは当てないでください。
振動部を強く押さえ過ぎても効果は上がりず、かえって症状が悪くなる恐れがあります。

- !** ご使用時間は1ヶ所で5分以内、1回につき15分以内にとどめてください。初めは1回の使用時間を3～5分で、慣れるにしたがって長くします。
15分をこえての使用は、筋肉、神経に対して必要以上の刺激となり逆効果です。




1ヶ所5分以内



1回15分以内

操作手順

1. 電源プラグをコンセントに差し込むと、「ビー」と警告音がします。コントローラーの**電源**ボタンを2秒以上押すと、「ピッ」と操作音がして電源「入」になり、『標準15分コース』強さ「3」でスタートします。
2. **コース**ボタンで、お好みのマッサージを選択してください。
『標準15分コース』を選択すると「ピッ」、
『くつろぎ10分コース』を選択すると「ピッピッ」、
『やすらぎ3分コース』を選択すると「ピッピッピッ」とそれぞれ操作音がします。
※7ページをご覧ください。
3. タタキや振動の**強・弱**ボタンで、強さを調整することができます。
強さ「4」を選択すると「ピッピッ」、
強さ「3・2・1」を選択すると「ピッ」、
「切」を選択すると「ビー」とそれぞれ操作音がします。
※7ページをご覧ください。

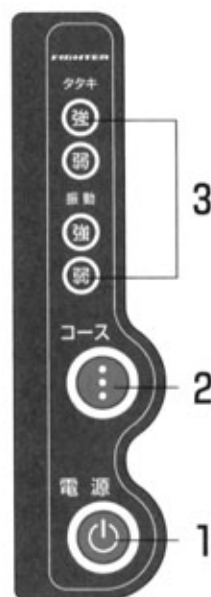

終了手順

1. コントローラーの**電源**ボタンを押すと、「ピッ」と操作音がして終了します。
2. 電源プラグをコンセントから抜いてください。



コントローラーの操作内容

◆コース選択

【コース】ボタンを押すと『標準15分コース』、『くつろぎ10分コース』、『やすらぎ3分コース』の順に切り替わります。



『標準15分コース』

タタキマッサージと振動マッサージを組み合わせた力強い刺激が気持ち良い「ごきげんボクサー」お薦めのマッサージコースです。疲労回復に「効く!」を実感できます。

『くつろぎ10分コース』


振動マッサージを基本にして、タタキマッサージをアクセントに取り入れた心地よい刺激のマッサージコースです。標準15分コースでは少し強すぎたり、ストレスが溜ってリフレッシュしたいときに効果的です。

『やすらぎ3分コース』

タタキ・振動ともに優しく穏やかなマッサージコースです。タタキがだんだん弱くなり振動だけになります。おやすみ前など身体も気分もリラックスしたいときにお薦めのコースです。

◆個別機能の強弱設定

使用中において、タタキと振動の強弱を個別機能で調節することができます。個別機能は強さ4段階『強4・3・2・1弱』と『切』の順に切り替わります。調節したい機能の【強】・【弱】ボタンを押すことにより自由に設定することが出来ます。

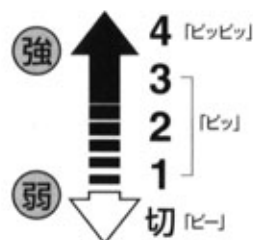

※電源投入時の強さは、タタキ・振動共に強さ『3』に設定されます。

※使用中にコース変更した場合、個別機能の強弱設定は継続されます。

●【強】調節ボタンを1回押すたびに強さが1モード上がります。(強4まで)

●【弱】調節ボタンを1回押すたびに強さが1モード下がります。

弱 を押し続けると『切』になり、その機能はカットされます。

注意：タタキ、振動を共に『切』にした場合、「ピッピッピッ」という警告音の後、10秒後に電源が切れます。



●ご注意

直接地肌に触れる場合、タタキや振動が強すぎると感じた場合は、厚手のタオルなどを当ててからご使用ください。




肩・首筋

マッサージャーを椅子の背、壁などと背中の中にはさみます。




背中・腰

マッサージャーを椅子の背、壁などと背中や腰の間にはさみます。

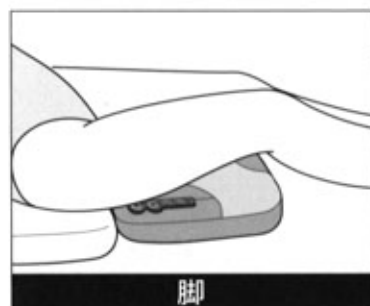


脚

マッサージャーを床に置き、力を抜いて脚をのせます。

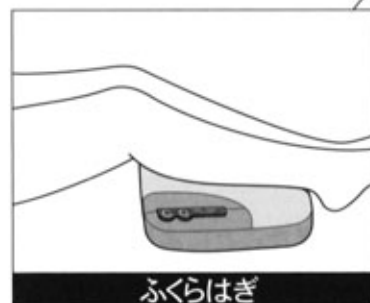

ふくらはぎ

マッサージャーを床に置き、ふくらはぎをのせます。

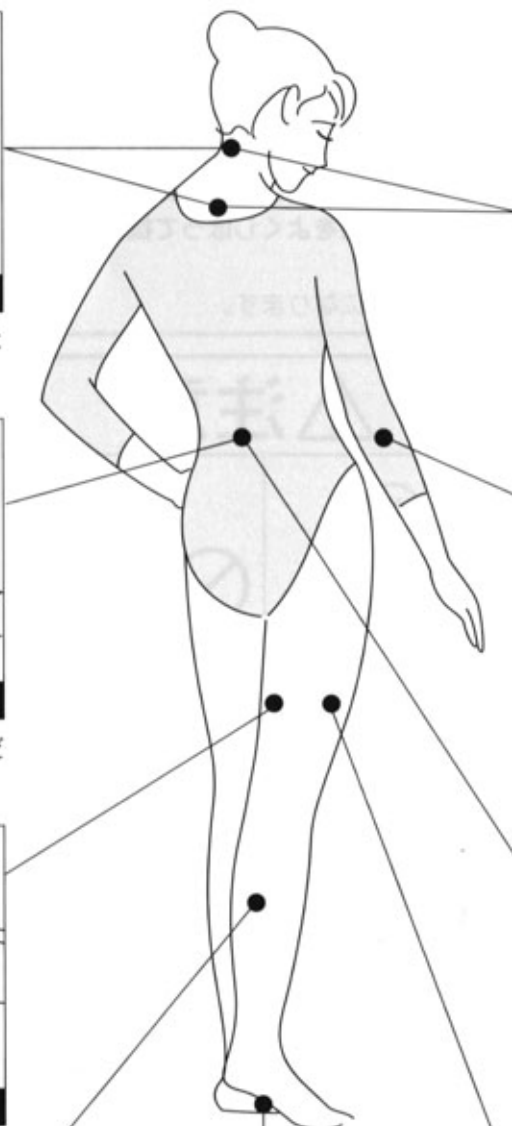


肩・首筋

マッサージャーを床に置き、頭の力を抜いて横になります。



腕

マッサージャーを床に置き横になるか、テーブル等の上に置いて腕をのせます。

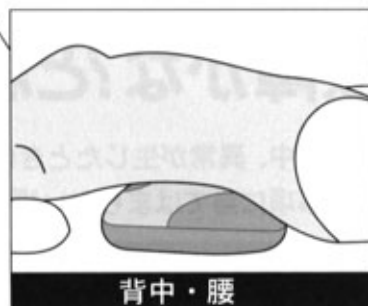

背中・腰

マッサージャーを床に置き、力を抜いて腰をのせます。



足の裏

マッサージャーを床に置き、足の裏をのせます。



脚

マッサージャーを持って、上から押し当てるようにします。

日常のお手入れについて/故障かな?と思われたとき

⚠ 警告



マッサージャーがよごれた場合、絶対に洗濯や水洗いしないでください。よごれた部分は、本体やコントローラーに湿気が入らないように注意して、水で濡らした布をよくしぼって拭き取ってください。

感電による大きな傷害事故の原因になります。



⚠ 注意



お手入れの前には、必ずコントローラーの電源を「切」の状態にし、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。



シンナーやベンジン等の揮発油は、絶対使用しないでください。

プラスチックなどが変色したり、印刷がはがれたりすることがあります。



故障かな?と思われたとき

ご使用中、異常が生じたときは下記によりお調べください。

下記事項に当てはまらない場合は修理をご依頼ください。

症 状	確 認 事 項
作動しない	●電源ボタンを2秒以上押し続けて、動作を確認してください。
	●電源プラグが、コンセントからはずれていないか確認してください。
	●使い過ぎタイマーが働いている場合があります。 コントローラーの電源を入れ直してください。
	●安全装置が働いている場合があります。 連続してお使いになる場合、内部部品が安全な温度を超えたことにより、安全回路が作動する場合があります。電源プラグをコンセントから抜いて、しばらくお待ちください。(数分後、自動的に復帰します。)

アフターサービスについて

保証書

(別に添付してあります。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みになって大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

(但し、消耗品は除きます。)

修理を依頼される時

9ページの「故障かな?と思われる時」の項目に当てはまらない場合は、すぐにマッサージャーの電源を切り、電源プラグを持ってコンセントから抜き、次の処置をしてください。

●保証期間中

保証書の規定に従って修理させていただきます。販売店または、直接弊社サービス係までご連絡ください。(保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。)(サービス係：本紙裏表紙をご覧ください。)

●保証期間経過後

販売店または、直接弊社サービス係までご連絡ください。修理可能な製品につきましては、有料にて修理致します。(修理不可能な場合もありますのでご了承ください。)


警告



お客様ご自身で修理されたり、改造のために故障した場合は保証期間内でも、保証できません。

また、ご自身での修理や改造は、絶対にしないでください。

感電等による大きな傷害事故の原因になります。

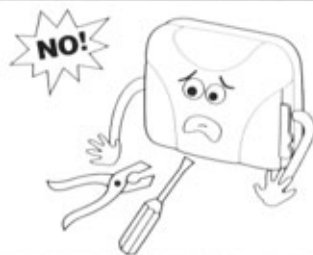

補修用性能部品の最低 保有期間

マッサージャーの補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)は製造打ち切り後最低5年間保有しております。

※アフターサービスについてわからないことは、お買上の販売店または、弊社サービス係にお問い合わせください。お問い合わせ先は、裏面に記載してあります。

弊社修理依頼のご案内

●サービス係

052-896-8155 受付時間 AM9:00 ~ PM5:00(土・日・祝祭日を除く)

愛情点検



★長年ご使用のマッサージャーの点検を!

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。

こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、時々運転しないことがある。
- 電源コードにひび割れや傷がある。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 時々止ったり、電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。

お願い

故障や事故防止のため、マッサージャーの電源を切り、電源プラグを持ってコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

上記症状がなくても、お買上後5年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。点検・修理に要する費用につきましては販売店にご相談ください。

■お客様メモ

お買い上げの際に記入しておきますと、修理などを依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年 月 日	品名(品番)	ファイターVM-6000 ごきげんボクサー
販売店名			

廃棄について この製品は一般家庭電気製品と同様の廃棄処理ができます。廃棄するときは、各地方自治体の処理方法に従ってください。

品質管理には万全を期しておりますが、ご使用中万一異常にお気づきの際は、お買上店または直接弊社サービス係までご連絡ください。なお、弊社宛の場合はお買上店名、年月日を必ずお知らせください。

発売元



寺西商事株式会社

本社/愛知県みよし市荻生並木60番地 〒470-0206

営業本部・サービス係/名古屋市天白区野並2丁目187番地 〒468-0045

☎(052)896-8155

ホームページ/<http://www.teranishi.co.jp/>

製造販売元



株式会社 寺西電機製作所

野並工場/名古屋市天白区野並2丁目187番地 〒468-0045

MADE IN JAPAN
2007年2月22日作成
(新様式第1版)